


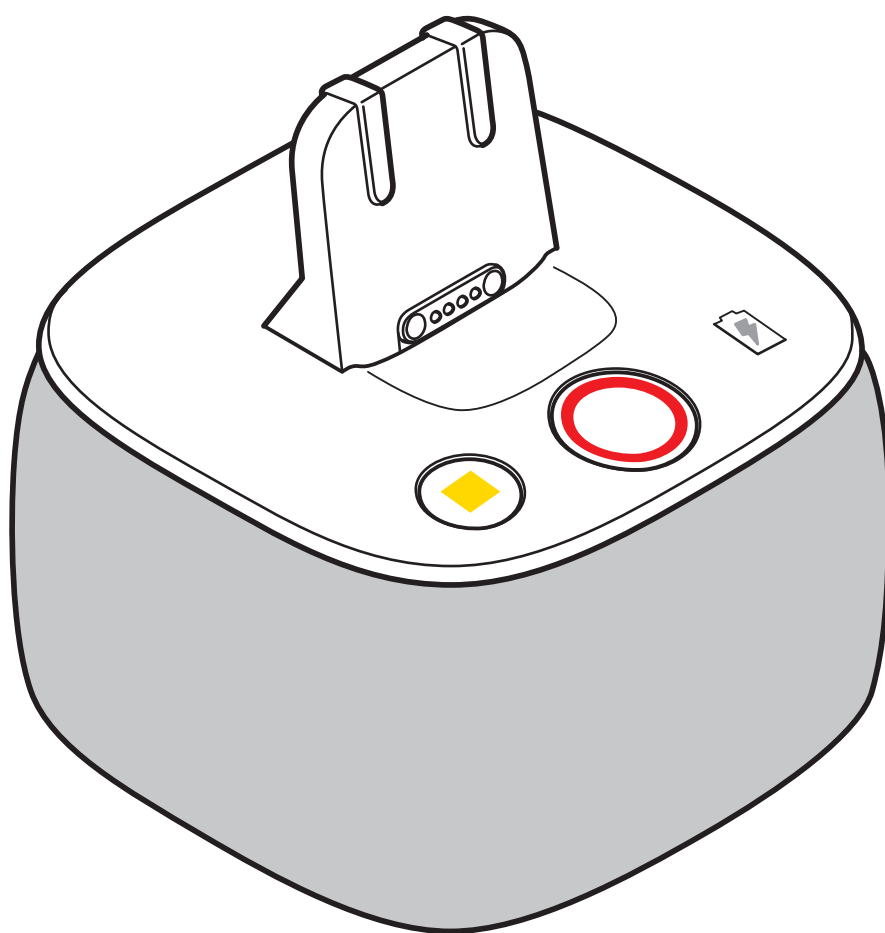

NOVO Go DOCK

Uživatelský manuál

Prohlášení o shodě

Legrand AB tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU Plný text prohlášení o shodě je dostupný na odkazu:

www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

© 2022 Legrand AB Všechna práva
vyhrazena.
ID dokumentu: NE41 21002-02 v 1.0
Datum revize: 2022-09-19 Legrand AB
Varuvägen 2
246 42 Löddeköpinge Sweden Phone:
+46 (0)46 70 70 65
www.neat-group.com info@neat-group.com



Obsah

1 Představení NOVO Go DOCK	4
1.1 Obsah balení	4
2 Váš NOVO Go DOCK	5
3 Začínáme s NOVO Go DOCK	6
3.1 Zapnutí NOVO Go DOCK	7
3.2 Vypnutí NOVO Go DOCK	7
4 Jak používat NOVO Go DOCK	8
4.1 Nabíjení s NOVO Go DOCK	8
4.2 NOVO Go DOCK jako reproduktor	8
4.3 Odesílání alarmu pomocí NOVO Go DOCK	8
4.4 Najít moje NOVO Go	8
4.5 Záložní baterie	9
5 Konfigurační mód NOVO Go DOCK	9
5.1 Vypnutí/zapnutí podsvícení	9
5.2 Úprava hlasitosti	9
6 Bezpečnost a obsluha	11
6.1 Čištění	11
6.2 Likvidace	11
7 Technická data	12

1 Představení NOVO Go DOCK


NOVO Go DOCK je zařízení, které doplňuje NOVO Go o následující funkce:

- Jednoduché nabíjení
- Hlasitý reproduktor pro větší dosah v domácnosti
- Záložní akumulátor pro NOVO Go (např. v případě výpadku proudu)
- Automatické přepínání mezi režimy Doma a Mimo domov pro větší výdrž baterie NOVO Go
- Funkci Najdi moje NOVO Go

NOVO Go DOCK nemá vlastní konektivitu a musí být připojen k NOVO Go pro odeslání alarmu.


Tento manuál poskytuje základní informace o použití NOVO Go DOCK ve spojení s NOVO Go. Pro další informace o nastavení a konfiguraci se obraťte na Technický manuál NOVO Go nebo vašeho distributora.

1.1 Obsah balení

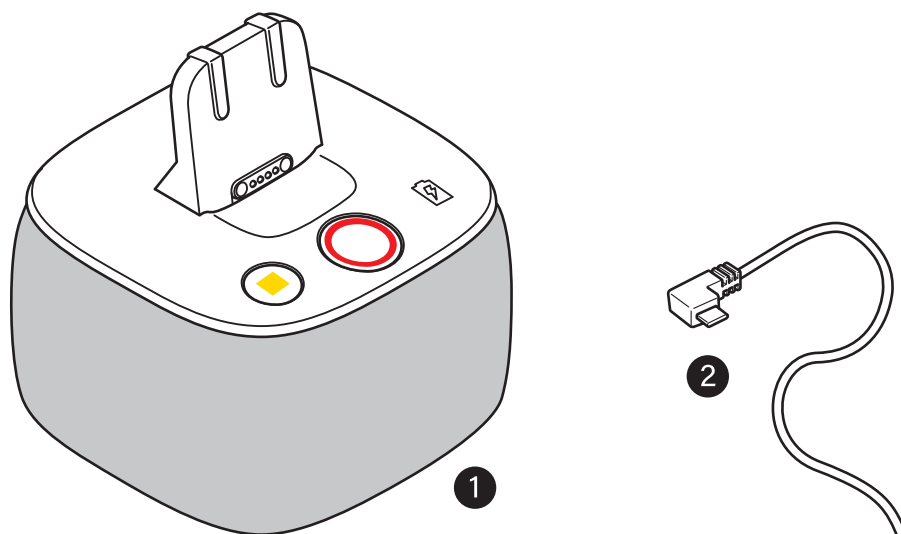

- 1 NOVO Go DOCK
- 2 Micro USB nabíječku s adaptérem do zásuvky EU/UK

2 Váš NOVO Go DOCK

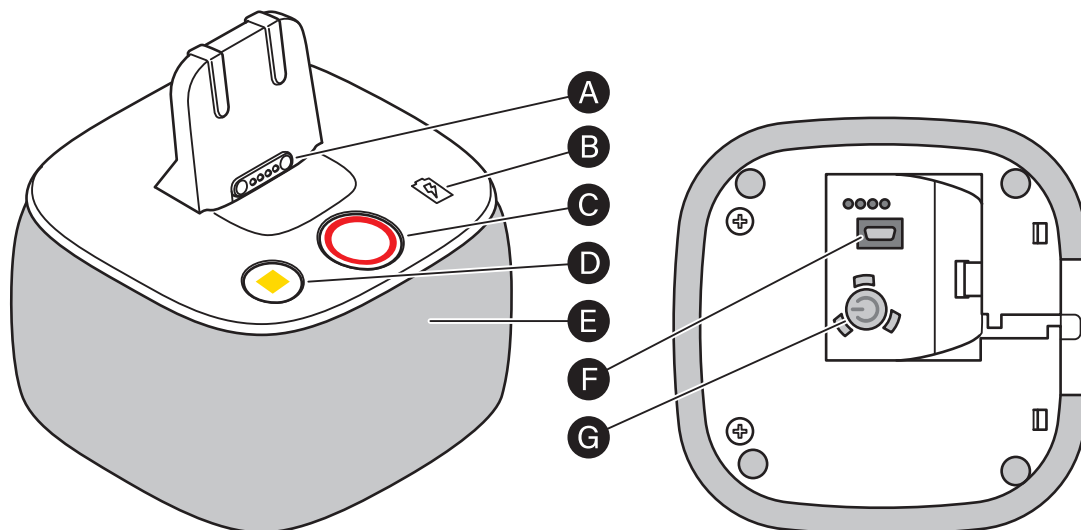

- A** Nabíjecí konektor
- B** Indikátor napájení
- C** Tísňové tlačítko
- D** Extra tlačítko
- E** Reprodukter
- F** Micro-USB konektor (zespodu pod krytem)
- G** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí (zespodu pod krytem)

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

3.1 Zapnutí NOVO Go DOCK

3.2 Vypnutí NOVO Go DOCK

3.3 Párování NOVO Go DOCK NOVO Go

4.3 Odeslání alarmu pomocí NOVO Go DOCK


4.4 Najít moje NOVO Go

5.1 Zapnutí/vypnutí podsvícení


5.2 Úprava hlasitosti

3 Začínáme s NOVO Go DOCK

1. Vyjměte **NOVO Go DOCK** z krabice
2. Zkontrolujte obsah pro chybějící nebo vadné položky. Pokud některá chybí nebo je poškozená, kontaktujte vašeho distributora Legrand Care.
3. Položte **NOVO Go DOCK** na něco stabilního poblíž zásuvky.
4. Otevřete víčko zespodu **NOVO Go DOCK**.

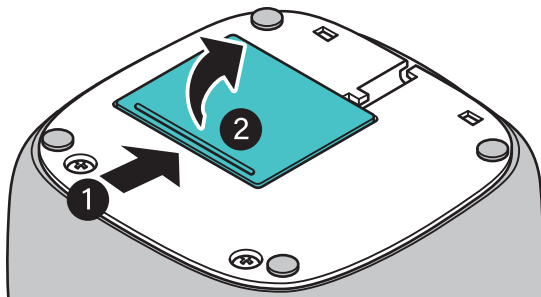

5. Sundejte plastovou krytku USB konektoru
6. Připojte Micro - USB konektor a opatrně umístěte kabel do chránicích držáčků dle obrázku.

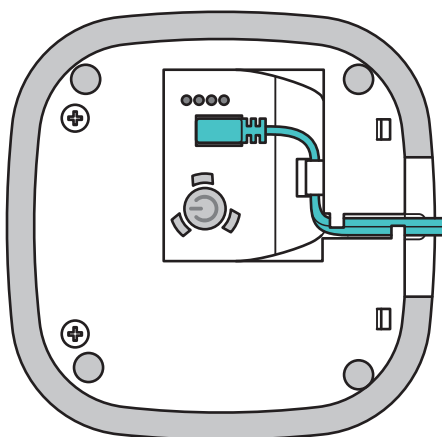

7. Připojte adaptér do zásuvky. **NOVO Go DOCK** se automaticky spustí, pokud ne postupujete dle návodu dále.
8. Spárujte **NOVO Go DOCK** s **NOVO Go**, viz [3.3 Párování NOVO Go DOCK a NOVO Go](#).
9. Umístěte **NOVO Go** do **NOVO Go DOCK**.
10. Proveďte funkční test, abyste měli jistotu, že **NOVO Go DOCK** funguje správně. Viz. [4.3 Odeslání alarmu pomocí NOVO Go DOCK](#).
11. Vyjměte **NOVO Go** z **NOVO Go DOCK** a opakujte krok 10
12. Pokud **NOVO Go** neodsílá alarm, kontaktujte vašeho distributora.
13. Pokud **NOVO Go** odesílá alarm, je vše připraveno.

3.1 Zapnutí NOVO GO DOCK

1. Otevřete spodní kryt NOVO Go DOCK.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí **G** déle než 3 vteřiny. Tlačítka na vrchu NOVO Go DOCK probliknou a zhasnou.
3. Po zhruba 3 vteřinách se rozsvítí červené tísňové tlačítko a zůstane svítit.

NOTE: Toto odpovídá standardnímu nastavení, jiná konfigurace viz [5.1 Zapnutí/vypnutí podsvícení tísňového tlačítka](#).

4. Zavřete kryt.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

[2 Váš NOVO Go DOCK](#)

[3 Začínáme s NOVO Go DOCK](#)

3.2 Vypnutí NOVO Go DOCK

1. Otevřete spodní kryt NOVO Go DOCK.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí **G** .
3. Po zhruba 3 vteřinách se NOVO Go DOCK přehraje zvuk a tísňové tlačítko zhasne.
4. Zavřete kryt.


SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA (Y)

[2 Váš NOVO Go DOCK](#)


3.3 Párování NOVO Go a NOVO Go DOCK

Manuální párování NOVO Go DOCK a NOVO Go provedete následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že dírky nahoře zařízení směřují vzhůru. **1**
2. Umístěte NOVO Go do NOVO Go DOCK.

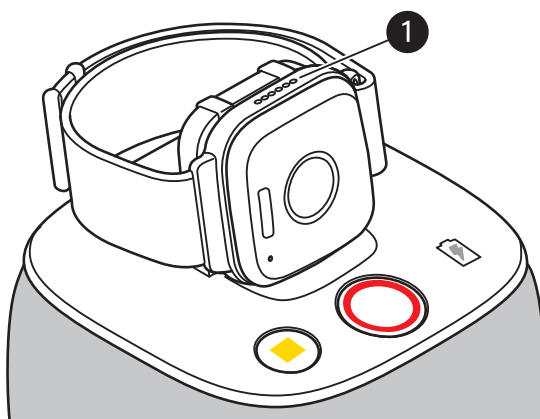

3. NOVO Go přehraje zvuk a ikona baterie se rozsvítí.

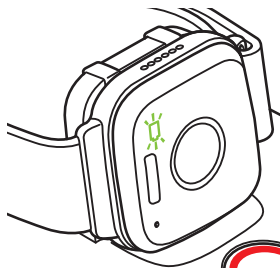

4. Na NOVO Go DOCK, stiskněte a držte Tísňové tlačítko **C** spolu s Extra tlačítkem **D** po dobu delší než 3 vteřiny.
5. NOVO Go DOCK přehraje zvuk a je spárován s NOVO Go.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

2 Váš NOVO Go DOCK


3 Začínáme s NOVO Go DOCK

4.2 NOVO Go DOCK jako reproduktor


4 Jak používat NOVO Go DOCK

4.1 Nabíjení s NOVO Go DOCK


1. Ujistěte se, že dírky nahoře zařízení směřují vzhůru. 1
2. Umístěte NOVO Go do NOVO Go DOCK.

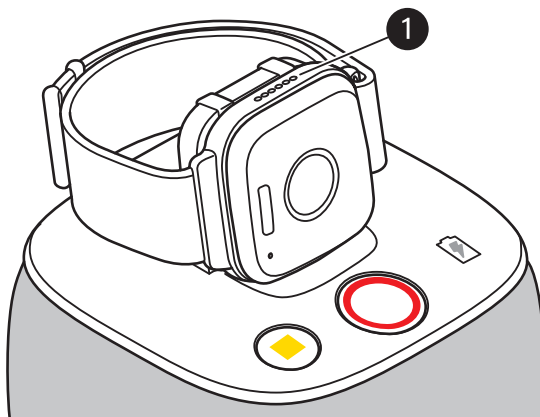

3. NOVO Go přehraje zvuk a ikona baterie se rozsvítí.

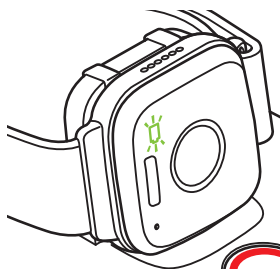

4. Když je NOVO Go plně nabité, ikona baterie zůstane svítit po dobu 1 minuty a poté zhasne.

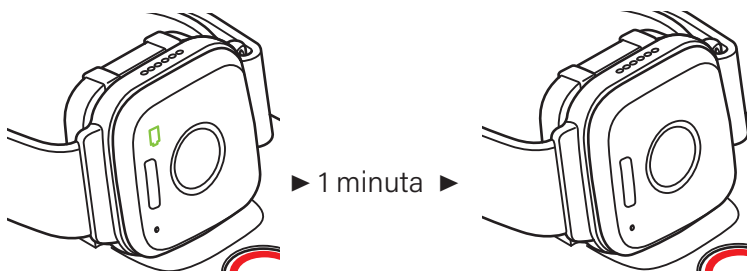

4.2 NOVO Go DOCK jako reproduktor

Umístěte NOVO Go do NOVO Go DOCK a NOVO Go DOCK bude fungovat jako reproduktor.

4.3 Odeslání alarmu pomocí NOVO Go DOCK

NOTE! Předtím než budete zkoušet tuto funkci se ujistěte, že NOVO Go a NOVO Go DOCK jsou spárovány. Viz [3.3 Párování NOVO Go DOCK a NOVO Go](#)

Pro odeslání alarmu pomocí NOVO Go DOCK postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že NOVO Go DOCK a NOVO Go jsou v jedné domácnosti. Není nutné, aby NOVO Go bylo umístěno do NOVO Go DOCK.
2. Na NOVO Go DOCK, stiskněte Tísňové tlačítko **C**. NOVO Go DOCK předá NOVO Go pokyn k odeslání alarmu.
3. NOVO Go odešle alarm dle konfigurace vašeho NOVO Go.

SOUVISEJÍ KAPITOLA(Y)

[2 Váš NOVO Go DOCK](#)


[3 Začínáme s NOVO Go DOCK](#)

[6 Bezpečnost a obsluha](#)

4.4 Najít moje NOVO Go

Pokud nemůžete najít vaše NOVO Go, postupujte následovně:

1. Stiskněte a držte Extra tlačítko **D** na NOVO Go DOCK po dobu delší než 3 vteřiny. NOVO Go DOCK přehraje zvuk a začne blikat žlutě.
2. NOVO Go začne v pravidelném intervalu přehrávat hlasitý zvuk. Tísňové tlačítko a Extra tlačítko blikají po dobu 60 vteřin.

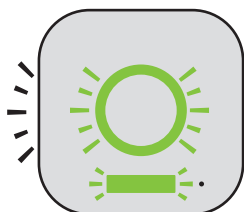

3. Jakmile najdete vaše NOVO Go stiskněte Extra tlačítko na NOVO Go. Přehrávání zvuku ustane a Extra tlačítko a Tísňové tlačítko přestanou blikat.
4. Extra tlačítko na NOVO Go DOCK automaticky přestane blikat po 60 vteřinách.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

[2 Váš NOVO Go DOCK](#)

4.5 Záložní baterie

Pokud je to nezbytné (například v případě výpadku napájení nebo vypojení ze zásuvky), **NOVO Go DOCK** funguje následovně:

- Pokračuje v nabíjení **NOVO Go** až po dobu 72 hodin.
- Upravuje podsvícení alarmového tlačítka na **NOVO Go DOCK** pro šetření baterie

Indikátor napájení ukazuje stav záložní baterie následovně:

 Napájení dostupné. Indikátor napájení je vypnutý. Záložní baterie pracuje správně.

 Bez napájení. Indikátor napájení pomalu zeleně problikává. Záložní baterie pracuje správně. Ujistěte se, že je AC adaptér zapojený do zásuvky.

 Bez napájení. Indikátor napájení pomalu problikává červeně. Stav záložní baterie je nízký. Ujistěte se, že je AC adaptér zapojený do zásuvky.

 Napájení dostupné. Indikátor napájení svítí červeně. Došlo k chybě baterie. Nechte AC adaptér zapojený a kontaktujte svého Legrand Care distributora.

5 Konfigurační mód NOVO Go DOCK

Konfigurační mód umožňuje lokální konfiguraci podsvícení tísňového tlačítka a hlasitosti reproduktoru.

5.1 Vypnutí/zapnutí podsvícení

1. Otevřete kryt zespodu NOVO Go DOCK.
2. Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. **G** Extra tlačítko žlutě problikne.
3. Stiskněte a držte tísňové tlačítko **C** NOVO Go DOCK přehraje zvuk.
4. Puště tísňové tlačítko jakmile NOVO Go DOCK přehraje zvuk znovu.
5. Zavřete kryt.

Funkce pracuje následujícím způsobem

- Pokud bylo podsvícení zapnuté, nyní je vypnuté.
- Pokud bylo podsvícení vypnuté, nyní je zapnuté.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA (Y)

2 Váš NOVO Go DOCK

5.2 Úprava hlasitosti

1. Otevřete kryt zespodu NOVO Go DOCK.
2. Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. **G** Extra tlačítko žlutě problikne.
3. Stiskněte a držte Extra tlačítko **D** Počet zvukových signálů indikuje různé úrovně hlasitosti:
 - Jeden signál/nízká hlasitost.
 - Dva signály/střední hlasitost
 - Tři signály/vysoká hlasitost
4. Puště Extra tlačítko po žádoucím počtu zvukových signálů.
5. Zavřete kryt.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

2 Váš NOVO Go DOCK

6 Bezpečnost a obsluha

- Před použitím si přečtěte manuál.
- Nepoužívejte zařízení, pokud existuje riziko úmrtí, v případě potřeby zdravotní péče volejte 112.
- Před použitím a po jakýchkoliv změnách proveďte funkční test.
- Používejte zařízení pouze v rozmezí teplot -0 to $+40$ °C. Vyhněte se vystavení přímému slunci a nepoužívejte v blízkosti ohně.
- Používejte ve spojení pouze se zařízeními a nabíječkami které schválil Legrand Care.
- **NOVO Go DOCK** nemá vlastní konektivitu, a musí být používáno spolu s **NOVO Go** pro odeslání alarmu.
- Chraňte před vlhkostí a prachem.
- Zacházejte se zařízením opatrně, nepouštějte ho na zem a nezacházejte s ním hrubě.
- Ujistěte se, že USB kabel a AC napájecí kabel nemohou být vystaveny zbytečnému namáhání, opotřebení či nemohou způsobit úraz.
- Nedržte zařízení blízko ucha nebo naslouchátka. Zvuk může být vysoký a může poškodit vaše uši.
- Neotvírejte zařízení. Pro opravu kontaktujte vašeho distributora Legrand Care.

6.1 Čištění

- Použijte slabé mýdlo nebo povrchovou dezinfekci a vlhký hadřík pro čištění zařízení.
- Nepoužívejte silné chemikálie nebo jiné materiály.
- Po čištění proveďte funkční test viz [4.3 Odeslání alarmu s NOVO Go DOCK](#).

6.2 Likvidace

Zařízení a/nebo jeho baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Pokud tak učiníte, zařízení může poškodit životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci zařízení kontaktujte svého distributora Legrand Care.



7 Technical Data

Rozměry (Š × V × H)	100 × 100 × 105 mm
Hmotnost	440 g
Provozní teplota	Mezi 0 a +40 °C
Baterie	NiMH, 2000mAh
Frekvence _{RF} (EU/UK)	869.2 MHz (Socialní Alarmy) Kategorie 1
Vysílací výkon _{max} (EU/UK)	10 mW (EIRP)
Nápajení	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Napájecí napětí	5 V



www.legrandcare.com