


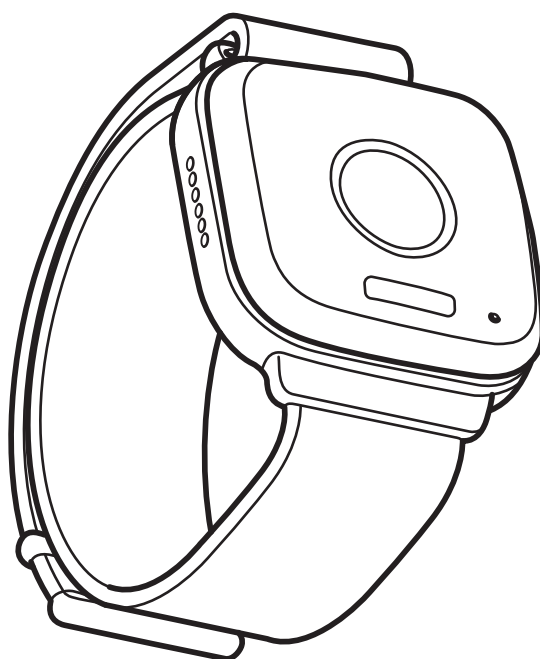

NOVO Go

Přenosné asistivní zařízení

Uživatelský manuál

Prohlášení o shodě

Legrand AB tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU

Plný text prohlášení o shodě je dostupný na odkazu:

www.neat-group.com/downloads/declarations-of-conformity

© 2022 Legrand AB Všechna práva
vyhrazena.
ID dokumentu: NE41 21002-02 v 1.0
Datum revize: 2022-09-19 Legrand AB
Varuvägen 2
246 42 Löddeköpinge Sweden
Phone: +46 (0)46 70 70 65
www.neat-group.com info@neat-group.com



Obsah

1	Představení NOVO GO	4
1.1	Obsah balení	4
2	Vaše NOVO Go	5
3	Začínáme s NOVO Go	6
3.1	Začínáme s NOVO Go + NOVO Go DOCK	6
4	Příslušenství	7
4.1	Přípojení příslušenství	7
4.2	Odebrání příslušenství	7
5	Odeslání alarmu s NOVO Go	8
5.1	Odeslání alarmu s varováním	8
5.2	Zrušení alarmu	9
5.3	Odeslání alarmu bez varování	9
6	Příchozí hlasový hovor	10
6.1	Přijetí příchozího hovoru manuálně	10
6.2	Odmítnout hlasový hovor.	10
7	Nabíjení NOVO Go	11
7.1	Nabíjení pomocí USB nabíječky	11
8	Provozní funkce	12
8.1	Pohotovostní režim	12
8.2	Kontrola stavu	12
8.3	Stav připojení k mobilní síti	12
8.4	Teplota zařízení	12
8.5	Zapnutí NOVO Go	13
8.6	Vypnutí NOVO Go	13
9	Bezpečnost a obsluha	15
9.1	Čištění	15
9.2	Likvidace	15
10	Technická data	16
Appendix 1	NOVO Go + NOVO	17
Appendix 2	Připojení s ostatními zařízeními	18
A2.1	Odeslání alarmu pomocí externího zařízení	18
A2.2	Příjem volání pomocí externího zařízení	18

1 Představení NOVO GO

NOVO Go je mobilní asistivní zařízení pro tísňovou péči s integrovanou SIM kartou a GPS, která poskytuje informace o poloze zařízení. Spuštění poplachu je možné skrze jednoduché stisknutí tlačítka a umožňuje obousměrné hlasové spojení s příjemcem volání. **NOVO Go** lze nosit na zápěstí nebo jako přívěšek na krku.

NOVO Go lze využívat následovně:


- samostatné tísňové zařízení.
- spolu s **NOVO Go DOCK**
- společně se stacionárním zařízením **NOVO**

Pro informaci o **NOVO Go DOCK** a stacionárním zařízení **NOVO** se, prosím, obraťte do příslušných uživatelských manuálů.

NOVO Go má rádiové rozhraní pro další zařízení a je plně integrované do IoT Telecare ekosystému Legrand Care.


Tento manuál poskytuje základní informace o použití **NOVO Go**. Pro další informace o nastavení a konfiguraci se obraťte na Technický manuál **NOVO Go** nebo vašeho distributora.

1.1 Obsah balení

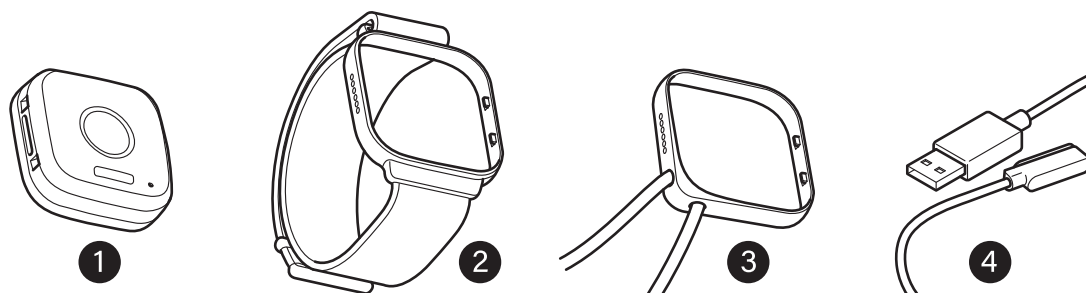

- 1 NOVO Go
- 2 Náramek na ruku
- 3 Přívěšek na krk
- 4 USB Nabíječka (včetně AC adaptéru do zásuvky EU nebo UK)
NOVO Go Uživatelský manuál

2 Vaše NOVO Go

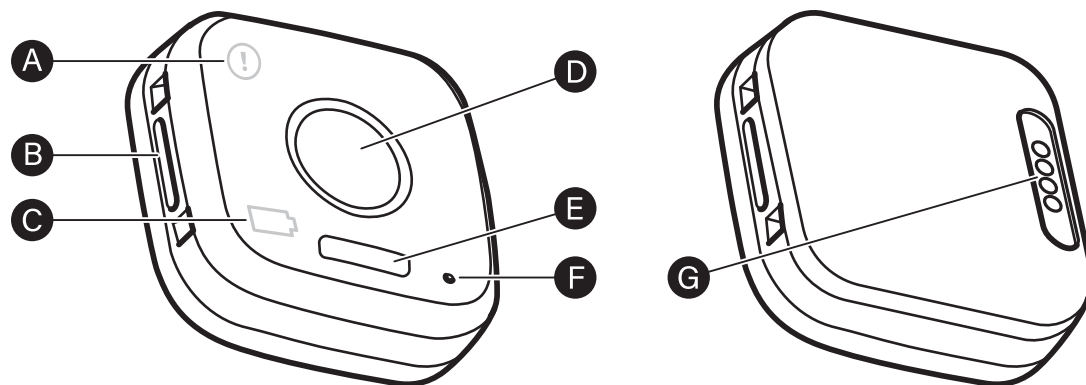

- A** Ikona sítě
- B** Reprodukter
- C** Ikona baterie
- D** Tísňové tlačítko
- E** Extra tlačítko
- F** Mikrofon
- G** Nabíjecí konektor

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

5 Odeslání alarmu s NOVO Go

8 Provozní funkce

3 Začínáme s NOVO Go

1. Vyjměte **NOVO Go** z krabice
2. Zkontrolujte obsah pro chybějící nebo vadné položky. Pokud některá chybí nebo je poškozená, kontaktujte vašeho distributora Legrand Care.
3. Připojte příslušenství k **NOVO Go** viz [4 Příslušenství](#).
4. Nabijte **NOVO Go** viz [7.1 Nabíjení pomocí USB nabíječky](#).
5. Software se automaticky aktualizuje. Tísňové tlačítko žlutě bliká a síťová ikona bliká zeleně pro 10 minut nebo méně.
6. Poté co tísňové tlačítko zhasne, pokračujte krokem 7.
7. Proveďte kontrolu stavu **NOVO Go**, viz [8.2 Kontrola stavu](#).
8. Proveďte zkoušku funkční test NOVO Go, viz [5 Odeslání alarmu s NOVO Go](#).
9. Pokud jsou výsledky testu neuspokojivé, kontaktujte svého Legrand Care distributora
10. Pokud jsou výsledky uspokojivé, je vše připraveno!

3.1 Začínáme s NOVO Go + NOVO Go DOCK


Viz uživatelský manuál NOVO Go DOCK.

4 Příslušenství

Proces je identický pro oba typy příslušenství.

4.1 Připojte příslušenství

1. Položte **NOVO Go** na něco stabilního tlakovým tlačítkem vzhůru.
2. Nastavte příslušenství nad **NOVO Go**.
3. Ujistěte se, že díry na stranách **1** směřují směrem k reproduktoru **B**.
4. Zatlačte, dokud neuslyšíte kliknutí na obou stranách.

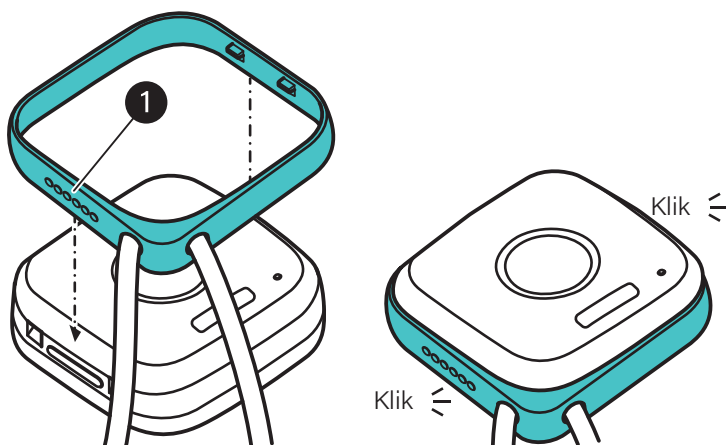


SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

3 Začínáme s NOVO Go

4.2 Odpojení příslušenství

1. Držte **NOVO Go** oběma rukama.
2. Pomocí palců zatlačte **NOVO Go** směrem dolů

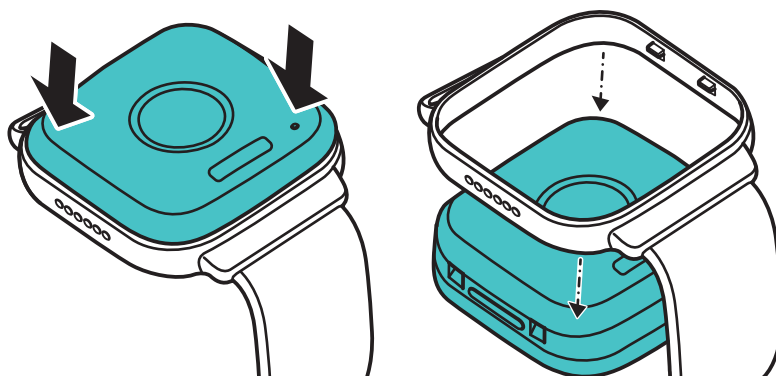

5 Odeslání alarmu s NOVO Go

Při běžném nastavení **NOVO Go** před odesláním alarmu přehrává varovný tón. Pro změnu nastavení varování před alarmem se obraťte do technického návodu k **NOVO Go**.


5.1 Odeslání alarmu s varováním

V této konfiguraci lze alarm, který byl například spuštěn omylem, zrušen. Viz [5.2 Zrušení alarmu](#).


1. Stiskněte tísňové tlačítko **D**
 - Tísňové tlačítko zčervená.
 - Extra tlačítko červeně bliká
 - Probíhá varování před alarmem.
 - Je možné alarm zrušit.



2. Po skončení varování **NOVO Go** odešle alarm
 - Tísňové tlačítko červeně bliká
 - **NOVO Go** přehraje zvuk.

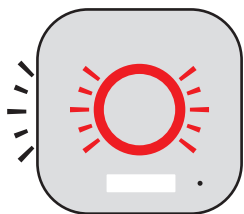

3. Když je alarm přijat, tísňové tlačítko změnu barvu na zelenou.

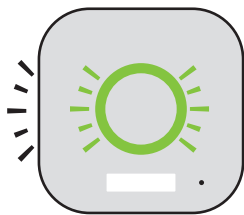

4. Hovořte s osobou, která alarm přijala. Alarm skončí ve chvíli, kdy je hovor ze strany osoby, která jej přijala, ukončen.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

[2 Vaše NOVO Go](#)

[3 Začínáme s NOVO Go](#)

5.2 Zrušení alarmu

Během varování před alarmem stiskněte Extra tlačítko. **E** Zvuk skončí a Extra tlačítko zhasne.


SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

2 Vaše NOVO Go

5.1 Odeslání alarmu s varováním

5.3 Odeslání alarmu bez varování

1. Stiskněte tísňové tlačítko **D**
2. NOVO Go přehraje krátký zvuk a odešle alarm.
3. Během přenosu alarmu:
 - Tísňové tlačítko červeně bliká.
 - NOVO Go přehraje zvuk.

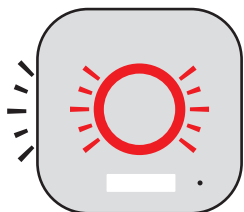

4. Když je alarm přijat, tísňové tlačítko změnu barvu na zelenou.



5. Hovořte s osobou, která alarm přijala. Alarm skončí ve chvíli, kdy je hovor ze strany osoby, která jej přijala, ukončen.

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

2 Vaše NOVO Go

3 Začínáme s NOVO Go

6 Příchozí hlasový hovor


NOVO Go může přijímat hlasové hovory ze schválených telefonních čísel.

6.1 Přijetí příchozího hovoru manuálně


V této konfiguraci lze příchozí hlasový hovor odmítnout. Viz

6.2 Odmítnutí hlasového hovoru.

1. **NOVO Go** přehraje signál příchozího hovoru. Tísňové tlačítko bliká zeleně a Extra tlačítko bliká červeně..

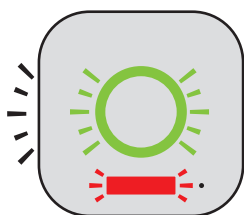

2. Stiskněte tísňové tlačítko. Tísňové tlačítko zůstane svítit zeleně, ale Extra tlačítko přestane svítit.

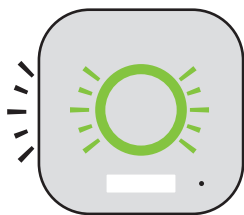


3. Hovořte s osobou, která alarm přijala. Alarm skončí ve chvíli, kdy je hovor ze strany osoby, která jej učinila, ukončen.

6.2 Odmítnutí příchozí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout následujícím způsobem

1. **NOVO GO** přehraje signál příchozího hovoru. Tísňové tlačítko bliká zeleně a Extra tlačítko bliká červeně.

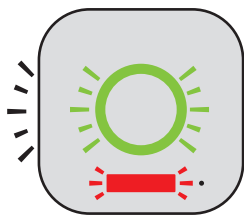

2. Stiskněte Extra tlačítko
 - Signál příchozího hovoru ustane.
 - Tísňové tlačítko a Extra tlačítko zhasnou.

7 Nabíjení NOVO Go


Pokud je **NOVO Go** vypnuté (například proto, že je akumulátor zcela vybitý) Automaticky se zapne po připojení k nabíječce.

Pokud ikona akumulátoru pomalu červeně bliká, je nutné zařízení nabít.



7.1 Nabíjení pomocí USB nabíječky

1. Připojte USB kabel k AC napájecímu adaptéru a připojte magnetický konektor zezadu k **NOVO Go**.

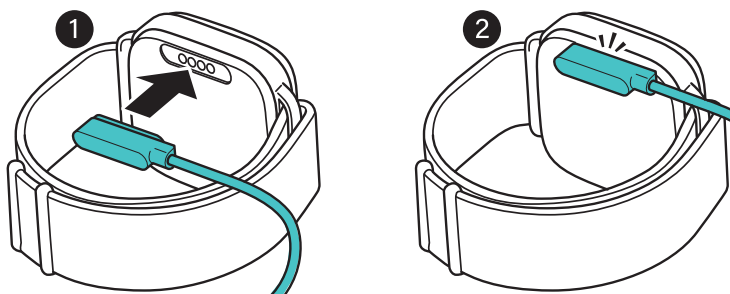

2. Připojte AC napájecí adaptér do zásuvky. **NOVO Go** přehraje zvuk. Ikona baterie začne blikat a bliká dokud **NOVO Go** není plně nabitě.



3. Pokud je to nezbytné, proveďte během nabíjení kontrolu stavu zařízení. Viz: [8.2 Kontrola stavu](#).
4. **NOVO Go** je plně nabitě, jakmile ikona akumulátoru trvale svítí po dobu 1 minuty a poté zhasne.



SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

3 Začínáme s NOVO Go

8 Provozní funkce


8.1 Pohotovostní režim

Pokud je **NOVO Go** v pohotovostním režimu, veškeré podsvícení zhasne.
Po operaci se **NOVO Go** vrátí do pohotovostního režimu po 2-5 vteřinách.

8.2 Kontrola stavu

Kontrolu stavu **NOVO Go** lze provést následovně:

1. Stiskněte Extra tlačítko **E**.
2. Tísňové tlačítko zobrazí jednu z následujících hodnot:

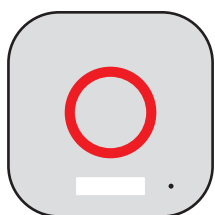

Červená: Stav
baterie 21-40 %



Žlutá: Stav
baterie 41-60 %



Zelená: Stav
baterie 61-100 %

SOUVISEJÍCÍ KAPITOLA(Y)

[2 Vaše NOVO Go](#)

[3 Začínáme s NOVO Go](#)

[7.1 Nabíjení pomocí USB nabíječky](#)

8.3 Stav připojení k mobilní síti


Pokud ikona sítě bliká, **NOVO Go** nedokáže navázat spojení s mobilní sítí a nemůže být odeslán žádný alarm.



Ikona sítě zmizí, jakmile **NOVO Go** naváže spojení.

8.4 Teplota zařízení

Pokud **NOVO Go** začne být příliš horké, všechny LED kontrolky začnou blikat a většina funkcí přestane fungovat. Všechny funkce se automaticky obnoví, jakmile klesne teplota zařízení.

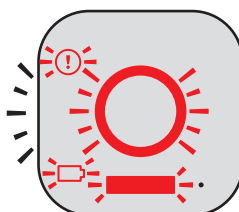

8.5 Zapnutí NOVO Go

1. Společně stiskněte a držte Tísňové tlačítko **D** a Extra tlačítko **E** po dobu 5 vteřin.
2. Tísňové tlačítko začne zeleně svítit po dobu 2 vteřin.
3. Síťová ikona pomalu bliká po dobu 5 vteřin, viz:
[8.3 Stav připojení k mobilní síti.](#)

8.6 Vypnutí NOVO Go

POZN! Pokud NOVO Go vypnete, nebude přijímat žádné rádiové signály z připojených zařízení, jako jsou detektory kouře a NOVO Go DOCK.


1. Společně stiskněte a držte Tísňové tlačítko **D** a Extra tlačítko **E** po dobu 5 vteřin. **NOVO Go** přehraje zvuk.
2. Po 5 vteřinách se rozsvítí tísňové tlačítko a postupně pomalu zhasne.

9 Další funkce

9.1 Pasivní alarm (Volitelné)

Pokud NOVO Go nezaznamená během stanové doby (typicky 24 hodin) žádný pohyb, může dojít k následujícímu:

1. Žluté tlačítko začne žlutě blikat po dobu 60 vteřin a **NOVO Go** oznamí nutnost stisknutí žlutého tlačítka.

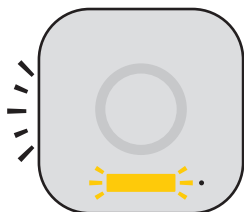

2. Stiskněte Extra tlačítko. Alarm je zrušen.
3. Pokud nestisknete Extra tlačítko, **NOVO Go** odešle alarm.

9.2 Upomínky (Volitelné)

V této konfiguraci **NOVO Go** v pravidelných intervalech automaticky připomíná určité úkony (např. medikaci). Proces je následující:

1. Hlas vám sdělí upomínku. Extra tlačítko bliká zeleně.



2. Provedte připomínaný úkon
3. Stiskněte Extra tlačítko. Tlačítko zhasne a ustane přehrávání hlášky.

9.3 Najít moje NOVO Go

Tato konfigurace je možná pouze v kombinaci s **NOVO Go DOCK**. Další informace v manuálu k **NOVO Go DOCK**.

10 Bezpečnost a obsluha

- Před použitím si přečtěte manuál.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud existuje riziko úmrtí, v případě potřeby zdravotní péče volejte 112.
 - Před použitím a po jakýchkoliv změnách proveďte funkční test.
 - Používejte zařízení pouze v rozmezí teplot -20 to $+50$ °C. Vyhňte se vystavení přímému slunci a nepoužívejte v blízkosti ohně.
 - Používejte ve spojení pouze se zařízeními, nabíječkami a konektory, které schválil Legrand Care.
 - Ujistěte se, že USB kabel a AC napájecí kabel nemohou být vystaveny zbytečnému namáhání, opotřebení či nemohou způsobit úraz.
 - Zařízení vypínejte pouze pokud bude delší dobu mimo provoz
- 8.6 Vypnutí NOVO Go.**
- Zacházejte se zařízením opatrně, nepouštějte ho na zem a nezacházejte s ním hrubě.
 - Nedržte zařízení blízko ucha nebo naslouchátka. Zvuk může být vysoký a může poškodit vaše uši.
 - Neotvírejte zařízení. Pro opravu kontaktujte vašeho distributora Legrand Care
 - Neumísťujte NOVO Go a/nebo USB nabíječku do blízkosti zařízení, která jsou citlivá na magnety, jako bankovní karty, nebo paměťová zařízení.
 - Zařízení disponuje připojením k mobilní síti a v situacích, například v letadle, by s ním mělo být nakládáno obdobně jako například s mobilním telefonem.
 - Pro poskytnutí přesné polohy musí být dostupný GPS signál. Přesnost polohy uvnitř budov a hustě zastavěných oblastech je limitována.
 - Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zdravotní zařízení, konzultujte použití **NOVO Go** nejprve s vaším lékařem.

10.1 Čištění

- Use a weak soap solution or a surface disinfection and a moist cloth to clean the device.
- Do not use strong chemicals, grease and other harsh material.

10.2 Likvidace

Při likvidaci NOVO Go se ujistěte že provedete následující kroky:

- Sundejte gumové kryty na zadní straně.
- Odšroubujte šrouby na zadní straně pomocí T5 TORX šroubováku.
- Odpojte baterii od desky, případně přestříhnete kabely.
- Zlikvidujte baterii, elektroniku a plastik dle lokálních předpisů.



Zařízení a/nebo jeho baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Pokud tak učiníte, zařízení může poškodit životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci zařízení kontaktujte svého distributora Legrand Care.

11 Technická data

Rozměry (Š × V × H)	40 × 40 × 13 mm
Hmotnost	33 g
Provozní teplota	Mezi -20 a +50 °C
Baterie	Lithium Polymer, 370 mAh
Doba nabíjení baterie	Až 4,5 hodiny
Komunikace	2G/3G/4G, VoLTE, roamingová SIM
Polohování	Asistovaná/samost. GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
GPS přesnost	~5 metry na otevřeném prostranství
Frekvence _{RF} (EU/UK)	869.200–869.250 MHz (Socialní Alarmy) Kategorie 1
Vysílací výkon _{max} (EU/UK) IP	869.2 MHz – 10 mW (EIRP)
Třída	IP67
Napájení	Magnetický USB konektor, 5 Vdc, 1A
Napájecí napětí	5 V
Výdrž baterie	~24 hodin při běžném provozu

APPENDIX 1 NOVO Go + stacionární zařízení NOVO

Je možné používat NOVO Go jako přenosné tlačítko k telefonu NOVO, pro nastavení se obraťte do technického manuálu NOVO.

APPENDIX 2 Připojení s ostatními zařízeními

NOVO Go může být připojeno k dalším zařízením jako je SMILE, TOUCH, DOOR a PIR II, viz NOVO Go Technický manuál.

PŘIDAT VYSÍLAČ

1. Vstupte do konfiguračního menu pomocí stisknutí sekvence: Extra tlačítko-Tísňové tlačítko-Extra tlačítko-Tísňové tlačítko.
2. NOVO Go přehraje: "Hlasitost reproduktoru".
3. Stiskněte znovu Extra tlačítko, NOVO Go přehraje: "Přidat vysílač".
4. Stiskněte Tísňové tlačítko, NOVO Go přehraje krátký tón a Tísňové tlačítko začne blikat.
5. Stiskněte tísňové tlačítko na zařízení, které chcete spárovat. NOVO Go přehraje krátký potvrzovací zvuk a NOVO Go pokračuje na další krok v konfiguračním menu "Test kontroly dosahu".
6. Stiskněte Extra tlačítko pro opuštění konfiguračního menu nebo počkejte 5 vteřin a NOVO Go opustí konfigurační menu automaticky.

A2.1 Odeslání alarmu pomocí externího zařízení

Na externím zařízení stiskněte tísňové tlačítko, NOVO Go spustí tísňovou sekvenci **5 Odeslání alarmu s NOVO Go.**

A2.2 Příjem volání pomocí externího zařízení

Pro přijetí příchozího volání stiskněte tísňové tlačítko na externím zařízení, viz **6 Příchozí hovor.**



www.legrandcare.com